




**Массажер для шеи Xiaomi
Dajiang Cervical Massager Neck Red (DJ-B19)
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор Массажера для шеи Dagiang Cervical Massager Neck Red (DJ-B19)

Интеллектуальный массажер шейного отдела позвоночника DJ-B19 имеет обтекаемую форму кольца, которая соответствует физиологической кривизне шейного отдела позвоночника человека. Он использует низкочастотные электрические импульсы, магнитные эффекты, нагрев в дальней инфракрасной области и круговое вытяжение для формирования энергетического поля Айхе.

- Поддержание правильной физиологической осанки является платформой для лечения шейного отдела позвоночника. Позвольте себе расслабиться и насладиться многофункциональной системой медицинского обслуживания дома.

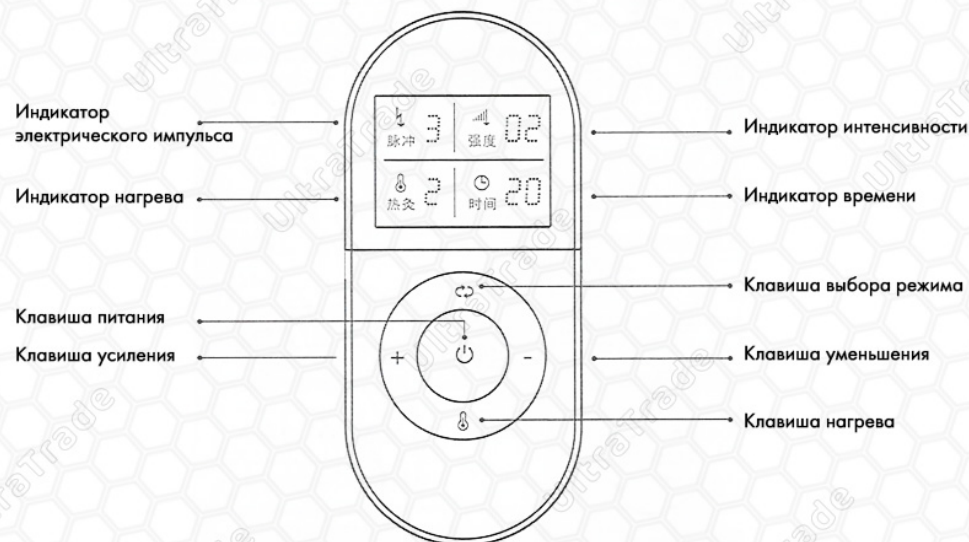

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

1. Смочите влажным полотенцем шейный отдел позвоночника и проводящую поверхность, а затем приложите массажер к шее. Если шейный отдел позвоночника покрыт потом, его необходимо очистить перед использованием.

2. Нажмите кнопку « ⏻ » на основном блоке, чтобы войти в состояние ожидания сигнала, и рабочий индикатор основного блока начнет мигать (основной блок находится в состоянии ожидания в течение 1 минуты, и он автоматически выключится, если не выбрать режим в течение 1 минуты). Для включения нажмите кнопку « ⏻ » на пульте дистанционного управления, основной блок издаст один звуковой сигнал, загорится подсветка экрана, а индикатор работы основного блока останется включенным, то есть настройки следующие:

- A. Автоматический режим - 1 массаж;
- B. Интенсивность массажа 0-ая передача;
- C. Средняя температура нагрева
- D. Время - 15 минут

Если вы хотите прекратить работу, вы можете нажать и удерживать кнопку « ⏻ » на пульте дистанционного управления в течение 2 секунд, чтобы выключить, или нажмите « ⏻ » на основном устройстве, чтобы выключить напрямую.

3. Использование клавиши « ⏻ ».

- A. В состоянии выключения нажмите кнопку « ⏻ » на основном устройстве, чтобы войти в состояние ожидания, и нажмите кнопку « ⏻ » на пульте дистанционного управления, чтобы включить;
- B. Во включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку хоста, чтобы выключить питание;
- C. Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку пульта дистанционного управления в течение 2 секунд, чтобы выключить питание.

4. Использование клавиши « ↻ »

Кнопка переключения импульсного режима, шесть импульсных режимов могут быть выбраны нажатием кнопки « ↻ » на пульте дистанционного управления, а настройка по умолчанию - Режим 1 (режим автоматической программы 1), когда массажер включен. После каждой смены режима интенсивность равна первой передаче.

Шесть режимов массажа:

- Режим 1: автоматическая программа (комбинация) 1
- Режим 2: автоматическая программа (комбинация) 2
- Режим 3: очищение
- Режим 4: нажатие
- Режим 5: кручение
- Режим 6: постукивание

Автоматический комбинированный режим 1 и 2 - это циклы автоматически изменяющихся режимов.

5. Используйте кнопку " + ", чтобы использовать кнопку увеличения интенсивности импульса, каждый раз при включении питания уровень интенсивности равен 0, нажмите кнопку " + " один раз, интенсивность увеличится на один уровень, всего 0-16 уровней интенсивности, массаж должен быть приемлемым по вашим ощущениям. Сила массажа должна быть подходящая, и рекомендуется начинать адаптацию со слабой передачи для первого использования.

6. Используйте кнопку " - ", чтобы использовать кнопку ослабления интенсивности импульса. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку " - ", интенсивность будет уменьшаться на один уровень, всего от 0 до 16 уровней интенсивности.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

7. Использование кнопки « 🔒 ».

Нажмите кнопку дистанционного управления для переключения между тремя режимами нагрева, а именно слабым нагревом (1), средним нагревом (2), сильным нагревом (3) и соответствующие индикации будут на экране при переключении, на «0» нагрев прекращается. (Настройка по умолчанию - средний нагрев).

8. Регулировка времени.

Находясь в состоянии включения, кратковременно нажмите кнопку « ⏸ » на пульте дистанционного управления, чтобы переключить таймер.

Время отсчета времени делится на 5, 10, 15, 20, 25, 30 минут (по умолчанию - 15 минут).

Всточника питания

- Источник питания массажера

Массажер питается от встроенной литиевой батареи и может быть включен без подключения к розетке.


- Зарядка продукта

Подключите кабель Micro USB к отверстию на левой стороне массажера, а другой конец подключите к источнику питания для мобильных устройств (5V1A), чтобы начать зарядку. Изделие нельзя включить во время зарядки.

- Установка батарейки в пульт дистанционного управления

Установите батарейку CR2032 в батарейный отсек на задней панели пульта дистанционного управления. Способ установки показан на рисунке ниже.

Отвинтите пальцами крышку батарейного отсека в канавке на крышке батарейного отсека. Поместите батарейку CR2032 спереди (положительный +) направлен вверх и вставьте его в пульт дистанционного управления. В батарейный отсек батарейного блока сначала вставьте установочный штифт на одном конце крышки батарейного отсека, а затем плотно нажмите на крышку батарейного отсека.

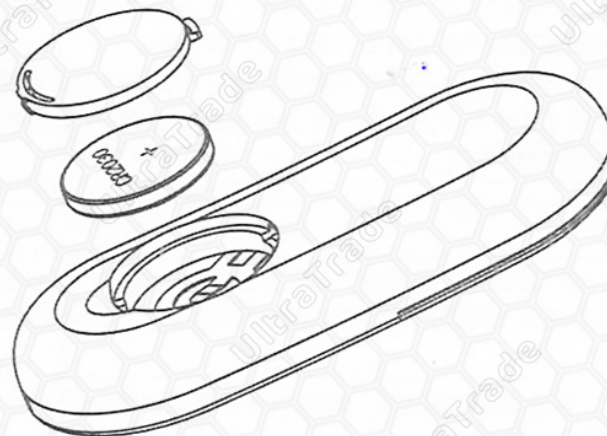

Использование батареи в пульте дистанционного управления

1. В пульте дистанционного управления используется батарейка типа CR2032, которую можно использовать около 3 месяцев (используя 30 минут в день).
2. Если при нажатии кнопки яркость подсветки порта пульта ДУ значительно ослабевает или хост пульта ДУ не чувствителен, это означает, что заряда батареи недостаточно, замените ее на новую.
3. Если продукт не используется в течение длительного времени, извлеките батарею. В противном случае аккумулятор может протечь и вызвать неисправность машины.
4. Не используйте батареи, отличные от указанных.
5. Не устанавливайте неправильно положительные и отрицательные полюса батареи, положительный полюс должен быть направлен вверх, а отрицательный полюс - вниз.
6. Не используйте батарею при температуре окружающей среды выше 45°C, иначе это повлияет на производительность и срок службы.
7. Утилизируйте использованную батарею в соответствии с действующими городскими правилами защиты окружающей среды.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Использование аккумуляторной батареи

1. В процессе использования интеллектуального массажера для шейного отдела позвоночника, когда вы постоянно слышите зуммер с подсказкой «ди, ди», это означает, что литиевая батарея разряжена, вы можете использовать источник питания USB для зарядки, Индикатор зарядки мигает зеленым светом, когда аккумулятор полностью заряжен, зеленый индикатор горит постоянно, для полной зарядки требуется около 2 часов.
2. Его можно использовать около 5 дней после полной зарядки (2 раза в день).
3. При нормальном использовании срок службы этой аккумуляторной батареи составляет 500 раз зарядки и разрядки, и ее можно использовать в течение 2-3 лет (30 минут в день).
4. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, срок его службы сокращается. Рекомендуется полностью заряжать его не реже одного раза в месяц.

Тип утилизации и извлечения аккумуляторных батарей

1. Встроенная литиевая батарея этого продукта содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед утилизацией этого продукта необходимо вынуть встроенную литиевую батарею.
2. Перед разборкой этого продукта и извлечением литиевой батареи обязательно выключите питание.
3. Подробные инструкции по извлечению литиевой батареи показаны на рисунке ниже: Следуйте последовательности 1 - 2, чтобы разобрать изделие и вынуть литиевую батарею.
4. Вынутую литиевую батарею следует безопасно утилизировать согласно местным законам.

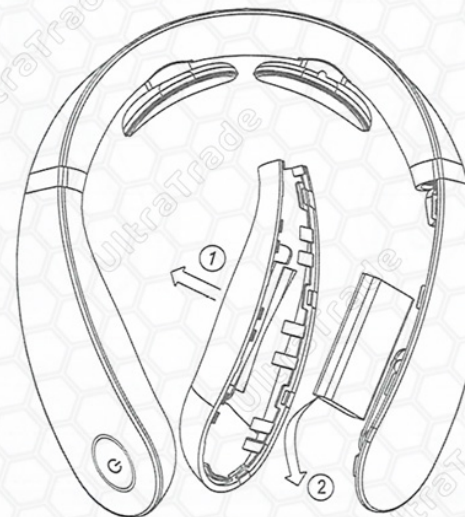

Технические параметры и характеристики

Название продукта:	Массажер для шеи DJI
Модель продукта:	DJ-B19
Номинальное напряжение:	5 В
Напряжение зарядки:	5 В 1 А
Номинальная мощность:	5 Вт
Емкость аккумулятора:	1100 мАч
Вес продукта:	190 г
Размер продукта:	166x134x420 мм
Частота импульсов:	1 Гц-1000 Гц;
Ширина импульса:	20 мкс ~ 400 мкс;
Форма импульса:	прямоугольная волна;
Номинальное сопротивление нагрузки:	500 Ом, допуск $\pm 10\%$;
Температура нагрева:	+38°C ~ +48°C (при температуре окружающей среды 25°C);
Напряженность поверхностного магнитного поля:	не менее 0,01 Тл.
Время синхронизации массажного инструмента:	5-30
Погрешность часов панорамирования	$\pm 10\%$

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Условия для правильной работы устройства

Температура окружающей среды: +5°C~ +40°C

Относительная влажность: ≤80%

Атмосферное давление: 86кПа~106кПа

Условия транспортировки и хранения

Температура окружающей среды: -20°C~ +55°C;

Относительная влажность: ≤93%;

Атмосферное давление: 50кПа~106кПа

Чистка, уход и хранение

1. Чистка и уход

Когда массажер загрязнен, его можно протереть сухой мягкой тканью или сухим полотенцем. Пожалуйста, очищайте проводящую поверхность чаще.

Вы можете протирать его мягкой тканью или полотенцем, смоченным в небольшом количестве воды, и выжимать насухо. Когда он особенно грязный, используйте мягкую ткань, пропитанную небольшим количеством спиртового раствора (с концентрация спирта до 75%).


2. Хранение


Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте. Не храните его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи нагревательных приборов и в местах с повышенной влажностью.


Массажер нужно хранить в сухом и проветриваемом месте. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт в частном порядке, так как это может привести к несчастным случаям или неисправностям.




Примечания по безопасности


Предупреждающие знаки и иллюстрации в руководстве предназначены для безопасного и правильного использования продукта, а также для предотвращения нанесения вреда вам и другим людям.

 **Опасность** Указывает на опасность, которая может привести к серьезным травмам или несчастным случаям при неправильном использовании.


 **Предостережение** Указывает на возможность серьезных травм или смерти в результате неправильного использования.

 **Примечание** При неправильном использовании может возникнуть опасность получения травмы или материального ущерба.

 Символ  означает запрет (то, что нельзя делать). Конкретный запрещенный контент обозначается текстом или изображением . Картинка слева означает "Разборка запрещена".

 Символ указывает на обязательное (то, что необходимо соблюдать). Конкретное обязательное содержание находится в тексте или на изображении посередине или рядом. Картинка слева показывает "Обязательное выполнение требований"

 Значение символа - "Предназначено только для использования в помещении".

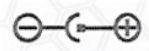
 Значение символа означает, что внутренняя поверхность является положительным полюсом источника питания постоянного тока, а внешняя - отрицательным полюсом источника питания постоянного тока.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.


 Опасность

 Не используйте его одновременно с другим медицинским электронным оборудованием, таким как кардиостимуляторы, ручное медицинское электронное оборудование, жизнеобеспечивающее медицинское электронное оборудование, электрокардиографы и другое медицинское электронное оборудование, в противном случае это создаст опасность. Когда используется массажер, положение электродов массажера может вызвать ожоги и может повредить массажер, если продукт используется рядом с оборудованием для коротковолновой или микроволновой обработки (1 метр), работа устройства может быть нестабильной.


 Предостережение

 Беременные женщины и женщины с менструальным циклом, чувствительной кожей, сердечными заболеваниями, аномальным артериальным давлением, злокачественными опухолями, цереброваскулярным пациентам, пациентам с острыми заболеваниями или другим пациентам, проходящим лечение, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием массажера.

-  1. Не используйте его возле сердца, головы, рта или половых органов, а также при кожных заболеваниях и т.п.
2. Запрещено использовать пациентам с нарушением кожной чувствительности.
3. Запрещается использовать людям, не чувствительным к теплу.
4. Не используйте этот продукт в местах с высокой температурой, воспламеняемостью, электромагнитным излучением и влажностью.
5. Запрещено использовать его во время купания, потоотделения и сна.

 Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте массажер, это может привести к неисправности или поражению электрическим током.

 Примечание

-  1. Не перемещайте массажер во время использования, при смене места массажа выключите его перед использованием, иначе возникнет сильное раздражение.
2. Пожалуйста, не используйте его для детей или людей с ограниченными способностями, которым требуется специальная опека.
3. Если вы почувствуете недомогание из-за использования этого продукта, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Анализ и устранение неисправностей

Явление отказа	Анализ компонентов отказа	Решение
Массажер не включается	Разрядилась внутренняя аккумуляторная батарея основного блока?	Если заряда внутренней аккумуляторной батареи недостаточно, зарядите ее.
	Зарядка нормальная?	Проверьте, подключен ли кабель для зарядки. При правильном подключении кабеля для зарядки, индикатор массажера будет мигать.
	Достаточно ли заряжена батарейка пульта дистанционного управления	Заменить батарейку в пульте ДУ (CR2032)
	Электроды массажера напрямую касаются кожи шейного отдела позвоночника?	Электроды массажера должны непосредственно касаться кожи шейного отдела позвоночника.
Массажер работает, но нет реакции или ощущения	Нет ли посторонних предметов в месте контакта электрода с кожей? (Волосы, одежда, аксессуары и другие предметы)	Уберите или снимите предметы
	Установлена ли интенсивность массажа?	После включения массажера состояние по умолчанию - интенсивность уровня 0, интенсивность необходимо отрегулировать, также некоторые пользователи не чувствуют интенсивность 1-2 уровней, пожалуйста, увеличьте интенсивность соответствующим образом.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Анализ и устранение неисправностей

Явление отказа	Анализ компонентов отказа	Решение
Покалывание	Электроды массажера плотно прилегают к коже шеи?	Сначала смочите кожу шеи влажным полотенцем, затем поднесите электрод к коже и отрегулируйте интенсивность и режим массажа.
	Слишком большая продолжительность массажа	Подходящее время - 10-20 минут на сеанс. Не чаще двух раз в день.
	Интенсивность массажа слишком велика?	Отрегулируйте интенсивность соответствующим образом.
	Есть ли на коже аллергия?	Проверьте кожу на наличие аллергической реакции. При незначительной аллергии вам нужно только сократить время массажа. Если аллергия сильная, прекратите использовать массажер, и сначала вам нужно пройти десенсибилизацию.
	Нет ли посторонних предметов в месте контакта электрода с кожей? (Волосы, одежда, аксессуары и другие предметы)	Уберите или снимите предметы
Прохладная окружающая среда и сухая кожа	Намочите кожу и поверхность электрода влажным полотенцем. Используйте функцию нагрева в течение 1-3 минут, а затем включите функцию электрического импульсного массажа.	

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Анализ и устранение неисправностей

Явление отказа	Анализ компонентов отказа	Решение
Импульс слабый	Находится ли кожа шеи близко к электроду?	Приблизьте массажер к коже и отрегулируйте соответствующую интенсивность.
	Электрод грязный или жирный?	Очистите поверхность электрода спиртовым раствором
	Аккумулятор разряжен?	Если заряда внутренней аккумуляторной батареи недостаточно, зарядите ее.
После использования следы покраснения на коже	Испытывали ли вы при использовании массажера сильное покалывание? Принимали ли вы лекарства?	Пожалуйста, прекратите использование массажеров, покраснение исчезнет само по себе через 3-5 дней.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.