



Массажное кресло Momoda Cloud AI Full Body Massage Chair (RT5870)
Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за покупку Массажного кресла Xiaomi Momoda Cloud AI Full Body Massage Chair. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности», там указана важная информация для обеспечения правильной работы и использования. Сохраните это руководство для использования в будущем.

«Меры предосторожности»

Перед использованием внимательно прочтите «Меры предосторожности» и четко соблюдайте их.

Указанные здесь меры предосторожности помогут вам безопасно и правильно использовать этот продукт.

Чтобы четко указать степень опасности и повреждения, в мерах предосторожности будет указан возможный ущерб, вызванный неправильным использованием.

Вред делится на «Предупреждение» и «Внимание». Оба являются важным контентом, связанным с безопасностью, обязательно соблюдайте их.



Предупреждение - Указывает, что при неправильном использовании, пользователь может получить серьезную травму.



Внимание - Указывает что при неправильном использовании, пользователь может получить травму или материальный ущерб.



- Указывает на запрещено использование.



- Указывает, что разборка запрещена.

Люди, которые не подходят для использования этого продукта.

Если у вас есть следующие симптомы, сначала проконсультируйтесь с врачом, и вы можете использовать массажное кресло под руководством врача.



Предупреждение

- ◆ Те, кто пользуется встроенным в тело медицинским электронным оборудованием, например, кардиостимулятором.
- ◆ Те, кто проходит лечение, особенно те, кто чувствует отклонения в своем теле.
- ◆ Пациенты, страдающие злокачественными опухолями, острыми заболеваниями, пороками сердца, тяжелой гипертонией и др. (Нужна нормальная личная опека)
- ◆ Беременные женщины, а также женщины во время менструации.
- ◆ Пациенты с остеопорозом и переломами позвоночника.
- ◆ Людям с кожными ранами и тем, кто нуждается в спокойном выздоровлении.
- ◆ Лица, у которых температура тела выше 38 градусов (лихорадочный период).
- ◆ Когда продукт нагревается, люди, не чувствительные к теплу, должны обращать на это внимание. (Нужна нормальная личная опека)
- ◆ Умственно отсталые или несовершеннолетние должны использовать его под присмотром нормального человека. (Нужна нормальная личная опека)

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Рекомендации работе с контроллером



Внимание

- ◆ Не прикасайтесь к контроллеру мокрыми руками и не тяните с силой за провода контроллера.
- ◆ Не проливайте воду на контроллер, чтобы избежать неисправности.
- ◆ Не кладите на контроллер тяжелые предметы.

Вилка и шнур питания



Внимание

- ◆ Не используйте источник питания с напряжением, отличным от номинального, во избежание возгорания или повреждения продукта.
- ◆ Не подключайте шнур питания к розетке мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ◆ Вынимая шнур питания из розетки, держите его за вилку, а не за провод.
- ◆ Не сдавливайте шнур питания креслом или другими тяжелыми предметами.
- ◆ Не повреждайте, не перегибайте, не тяните, не перекручивайте и не завязывайте шнур питания узлами.
- ◆ Если шнур питания поврежден, не разбирайте и не меняйте его в частном порядке, а обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту.

Внешняя среда



Внимание

- ◆ Не используйте этот продукт в среде, где температура в помещении выше 40°C.
- ◆ Не используйте продукт во влажной или чрезмерно запыленной среде, чтобы избежать поражения электрическим током или поломки машины.
- ◆ Не используйте устройство во время ударов молнии и вытаскивайте вилку кабеля питания из розетки.
- ◆ Не размещайте изделие на открытом воздухе.
- ◆ Используйте изделие на ровной поверхности.
- ◆ Не ставьте массажное кресло возле плиты или под прямыми солнечными лучами.

Необходимо знать при использовании



Внимание

- ◆ Этот продукт предназначен только для людей весом менее 120 кг.
- ◆ Не используйте другое терапевтическое оборудование во время использования этого аппарата.
- ◆ Не использовать в лечебных целях.
- ◆ Этот продукт предназначен только для одного человека, пожалуйста, не используйте его двумя или более людьми одновременно.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Необходимо знать при использовании



Внимание

- ◆ Не используйте сразу после еды, чтобы избежать дискомфорта.
 - ◆ При использовании продукта не кладите в карманы ценные вещи, например мобильные телефоны, и не снимайте аксессуары с рук.
 - ◆ Перед использованием поднимите подушку спинки, чтобы убедиться, что спинка и другие части ткани не повреждены, если таковые имеются.
- Если кресло повреждено, немедленно прекратите его использование и передайте в специализированный сервисный центр для ремонта.
- ◆ Если ваше тело выглядит или кажется ненормальным во время использования, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
 - ◆ Рекомендуется использовать этот продукт каждый раз в течение 20 минут.
 - ◆ Регулируя угол наклона спинки стула или икр ног, убедитесь, что позади стула нет людей или других препятствий.
- Перед регулировкой убедитесь, что есть достаточно места.
- ◆ При опускании ног или спинки убедитесь, что к ногам или спинке не прилагаются другие чрезмерные внешние силы.
- Кроме того, убедитесь, что под ногами или под спинкой нет детей, животных или других предметов.
- ◆ Не катайтесь на изделии, чтобы избежать травм или поломки.
 - ◆ Не перемещайте ролики, не толкайте и не тяните ролики по деревянному полу, коврам и другим легко повреждаемым поверхностям.



Использование запрещено

- ◆ Если обнаружено, что изделие повреждено, имеет трещины, протекает или обнажены связанные детали, его использование запрещено.
- ◆ Запрещается вставать на поддержку для икр ног и давить на нее другими тяжелыми предметами.
- ◆ Не позволяйте детям пользоваться массажным креслом или играть на нем.
- ◆ Не засыпайте на кресле, пока оно работает.
- ◆ Не используйте этот продукт в нетрезвом или нездоровом состоянии.
- ◆ Не вставляйте пальцы или другие предметы в отверстие изделия, чтобы избежать травм или поломки.
- ◆ Немедленно прекратите использование и выключите прибор из розетки, если во время использования обнаруживаются любые аномальные условия (например, дым, специфический запах и т.п.).



Разборка запрещено

- ◆ Не разбирайте внутренние компоненты продукта в частном порядке, чтобы избежать возможности поломки машины.
- ◆ Изделие нельзя разбирать или ремонтировать, за исключением специализированных сервисных центров, назначенных компанией.

Если у вас возникнут вопросы, своевременно обращайтесь к дилеру.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



Отключение питания

- ◆ При проведении технического обслуживания выньте вилку кабеля питания из розетки. Кроме того, не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током и травм.
- ◆ Вынимайте вилку шнура питания из розетки после использования или во время хранения массажного кресла.
- ◆ В случае сбоя питания немедленно выключите питание и выньте вилку из розетки.

Внешний вид и конструкция

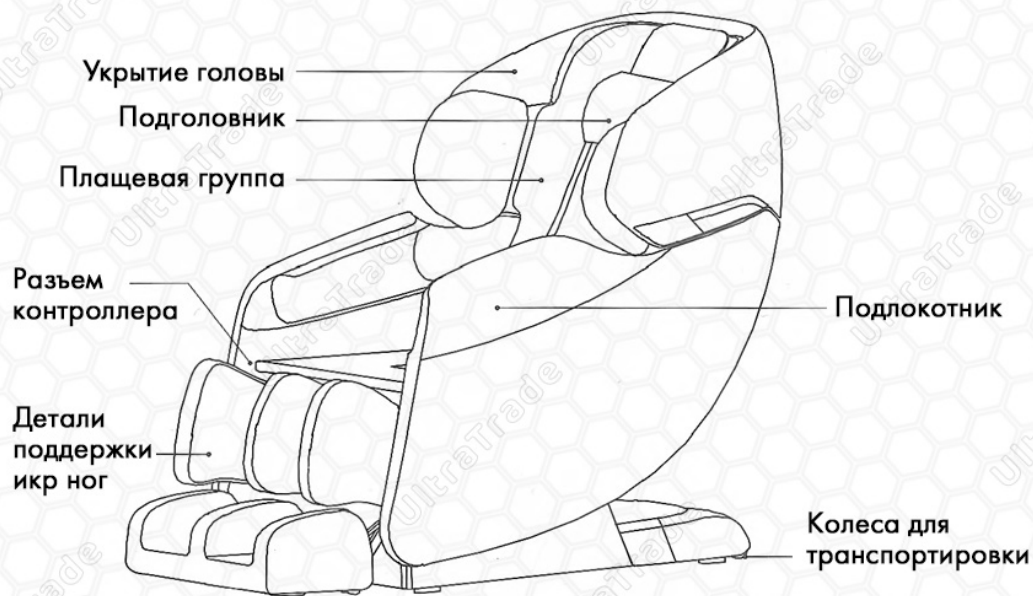

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



Внимание

- ◆ Не позволяйте детям играть на массажном кресле и приближаться к блоку питания, чтобы избежать несчастных случаев.
 - ◆ После использования массажного кресла выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки.
 - ◆ Не используйте при ударе молнии и во время грозы.
 - ◆ Во избежание несчастных случаев из-за того, что дети случайно включили массажное кресло, массажное кресло должно быть закрыто, когда оно не используется.
- Выключите питание, а затем выньте вилку кабеля питания из розетки.
- ◆ Если вы не используете его в течение длительного времени, уберите массажное кресло для хранения.

Пульт управления (Контроллер)



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Описание кнопок контроллера



Кнопка питания: включение / выключение функции массажа всей машины.

► Когда питание включено, нажмите эту кнопку, чтобы открыть главную страницу функционального меню, на ЖК-экране.

Выберите автоматическую программу, ручную программу, воздушную подушку, обогрев, функцию роликового массажа и меню настроек.

► Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы закрыть все функции машины.



Кнопка меню

► Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать автоматическую программу, ручную программу, воздушную подушку, обогрев, функцию роликового массажа и меню настроек.

(Подробнее см. Описание меню ЖК-дисплея)



Кнопка регулировки положения плеч

► Когда функция массажа находится в ручном режиме, нажмите вверх или вниз, точное положение фиксированной точки массажа можно отрегулировать, не отпуская.

► При регулировке положения плеч вы можете отрегулировать положение плеч.



Обогрев включен

► Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию заднего обогрева, и значок обогрева на дисплее станет ярче.

Выключение обогрева

► Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить функцию обратного обогрева, и значок кнопки погаснет.



Кнопка автоматической программы


► Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню автоматической программы, в зависимости от вашего физического состояния и времени массажа, вы можете выбрать целенаправленный массаж для любой из шести массажных процедур, включая восстановление после упражнений, растяжку и активацию, отдых и расслабление, рабочую декомпрессию, фокусировку на плечах и шее и облегчение поясницы. В выключенном состоянии нажмите кнопку автоматической программы в течение 3 секунд, чтобы сбросить соединение WIFI. (Подробнее см. Описание меню ЖК-дисплея)



Клавиша ручной программы

► Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню ручной программы, в зависимости от вашего физического состояния, вы можете выбрать разминание, нажатие, процедуры ручного массажа разминания, постукивание, точечного массажа и растираний спины для целевого массажа.

(Подробнее см. Описание меню ЖК-дисплея)

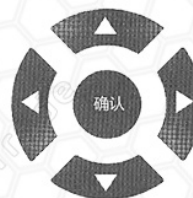

Клавиши регулировки направления

► Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить регулировку вверх, вниз, влево и вправо в меню и в автоматическом режиме. Когда соответствующая функция выбрана, нажмите центральную кнопку «подтверждения» для подтверждения, затем можно будет использовать текущую функцию массажа.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



Кнопка подъема спинки

► Нажмите и удерживайте эту кнопку, и спинка автоматически поднимется в исходное положение спинки; отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.



Кнопка опускания спинки

► Нажмите и удерживайте эту кнопку и удерживайте, чтобы спинка автоматически опустилась в самое нижнее положение; отпустите кнопку, чтобы остановить опускание.

1
零重力
2

Невесомость 1 / 2


► Нажмите кнопку невесомости 1, на ЖК-экране загорится индикатор нулевой гравитации 1, и массажное кресло перейдет в состояние нулевой гравитации 1, нажмите кнопку нулевой гравитации 1 еще раз, чтобы вернуться;

► Нажмите кнопку невесомости 2, ЖК-экран Горит невесомость 2 в верхней части, массажное кресло переходит в состояние невесомости 2, нажмите кнопку невесомости 2 еще раз, чтобы вернуться.

Описание меню ЖК-экрана

► Автоматическая программа

Когда питание включено, нажмите кнопку «Включение/Выключение», ЖК-экран загорится, выберите «Авто», чтобы войти в параметры меню автоматической программы, вы можете выбрать восстановление после упражнений, растяжку и активацию, отдых и расслабление, рабочую декомпрессию, фокусировку на плечах и шее и облегчение поясницы. Любой из шести видов массажных процедур для целевого массажа. (См. Меню ниже)

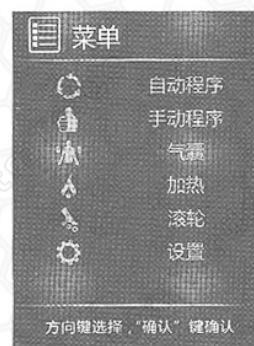

Восстановление после упражнений: он подходит для восстанавливающего массажа после работы, который может снять усталость за день и эффективно помочь вам восстановить свои физические силы.

Растяжка и активация: он подходит для растягивающего массажа сидячих офисных работников или водителей, который может растянуть мышцы и кости и восстановить физическую силу.

Отдых и расслабление: расслабляющий массаж, подходящий для утренних или дневных сеансов, который поможет вам укрепить жизненную силу мышц.

Рабочая декомпрессия: подходит для уменьшения болезненности спины, поясницы и шеи.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Выполните восстанавливающий массаж на определенном болезненном месте, чтобы можно было эффективно снять болезненность.

Фокус на плече и шее / облегчение поясницы: в зависимости от физического состояния и необходимости, выберите определенную область для массажа.

► Ручная программа Нажмите кнопку «Меню», выберите «Ручная программа» и войдите в опцию ручного программирования, нажмите клавиши вверх и вниз для выбора:


Режим, положение, диапазон, функция скорости массажа.

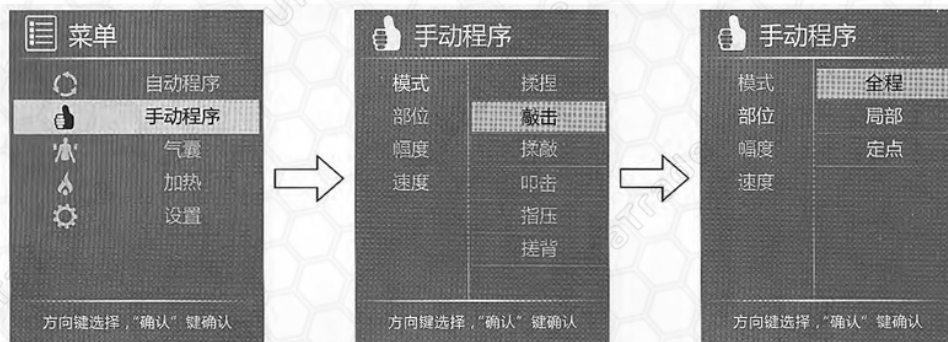

Режим: в режиме функции сначала нажмите правую кнопку, затем нажимайте кнопки "вверх" или "вниз" чтобы выбрать "разминание", "нажатие", "ручной массаж", "постукивание", "точечный массаж" и "растирание спины"

Положение: в разделе функций положение сначала нажмите правую кнопку, а затем нажимайте кнопки регулировки вверх и вниз, чтобы циклически выбирать полную, частичную и фиксированную точки.

Механизм массажа спины массирует в полной, частичной и фиксированной точках соответственно.

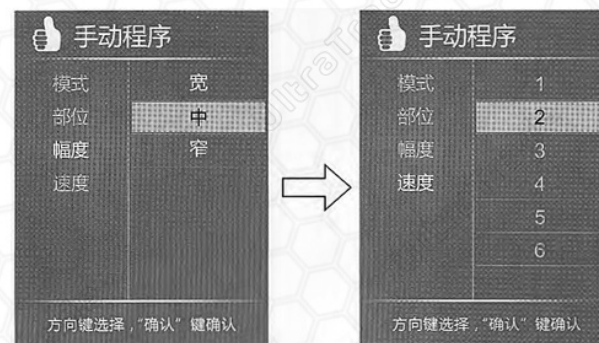


Амплитуда: в функции амплитуды сначала нажмите правую кнопку, а затем нажимайте кнопки регулировки вверх и вниз для переключения между широкой, средней и узкой амплитудами массажа.

Скорость: в функции скорость сначала нажмите правую кнопку, а затем нажимайте кнопки регулировки вверх и вниз, чтобы выбрать 1 - 6 скорость массажа.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

► Воздушная подушка

Нажмите кнопку «Меню», выберите «Воздушная подушка» и войдите в параметры меню "Воздушной подушки", нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать: расположение и силу подушки.

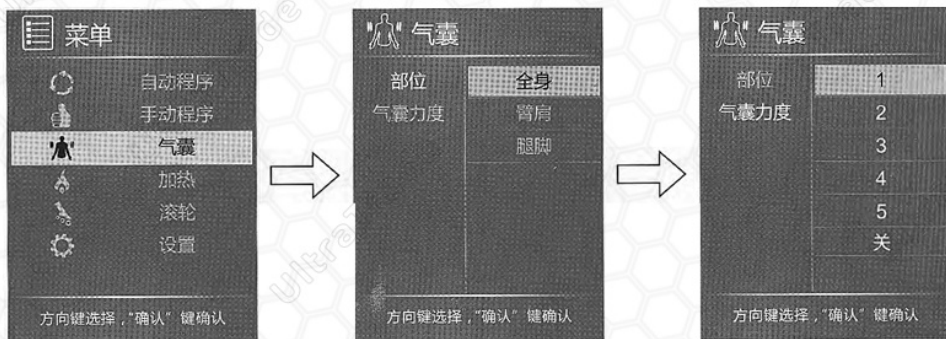


Расположение: в режиме определения местоположения сначала нажмите правую кнопку, а затем нажимайте кнопки регулировки вверх и вниз, чтобы циклически переключаться между функциями массажа подушек безопасности всего тела, рук, плеч, ног и ступней.

Сила воздушной подушки: в функции силы воздушной подушки сначала нажмите правую кнопку, а затем нажимайте кнопки регулировки вверх и вниз для циклического выбора силы подушки безопасности 1 - 5 или ее закрытия.


► Обогрев

Нажмите кнопку «Меню», выберите «Обогрев» и затем войдите в режим обогрева спинки. Нажмите кнопки регулировки вверх и вниз для переключения между включением и выключением опции.

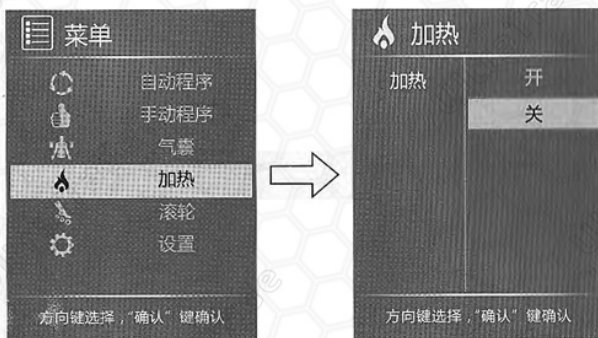


► Ролик массажа ступней

Нажмите кнопку «меню», выберите «ролик», а затем войдите в опцию меню скорости прокрутки, нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать 1 - 3 уровень регулировки скорости ролика или выключить ролик массажа ступней

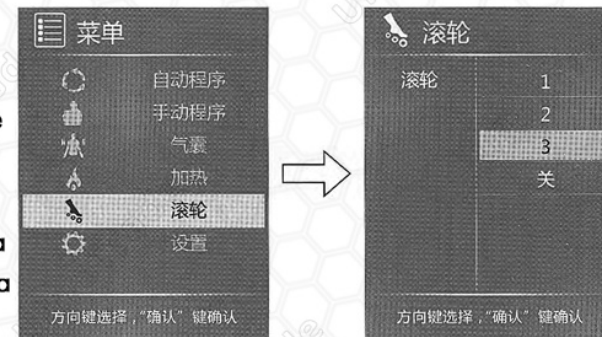

► Настройки

Нажмите кнопку «Меню», выберите «Настройки» и войдите в параметры меню настроек, с помощью клавиш вверх и вниз выберите: время, языковые настройки.

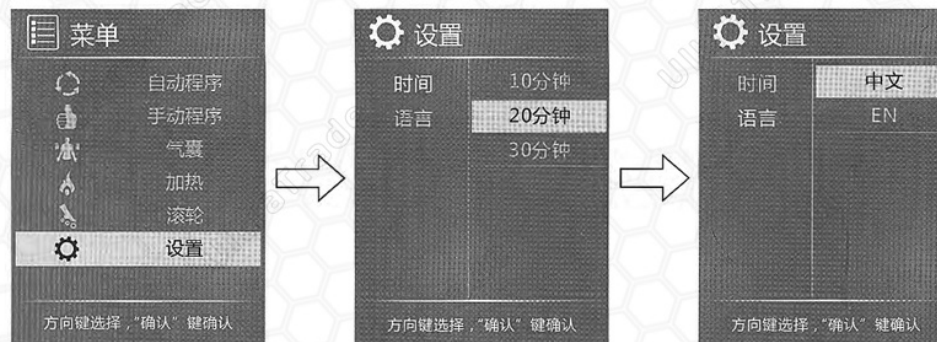

Время:

Чтобы установить время работы, сначала нажмите правую кнопку, а затем нажимайте клавиши регулировки вверх и вниз, чтобы циклически выбирать 10, 20 и 30 минут. Время работы по умолчанию - 20 минут.

Язык:

Чтобы установить язык меню управления, сначала нажмите правую кнопку, а затем нажимайте клавиши регулировки вверх и вниз для переключения между китайским и английским языками.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

В режиме автоматической или ручной программы экран автоматически переключится на главную страницу примерно на 10 секунд в нерабочем состоянии. (Смотри ниже)



Главная страница
в ручном режиме
программы



Главная страница
в автоматическом
режиме программы

- В рабочем состоянии дважды нажмите кнопку «Меню», чтобы быстро вернуться на главную страницу.
- На этой странице (в ручной или автоматической программе) нажмите левую и правую клавиши, чтобы отрегулировать интенсивность воздушной подушки, и нажмите клавиши вверх и вниз в ручном режиме, чтобы отрегулировать интенсивность массажа (интенсивность массажа не может быть отрегулирована в режиме автоматической программы).
- Нажмите кнопку «Авто», чтобы напрямую выбрать автоматическую программу.



Внимание!

- Не разбирайте внутренние компоненты продукта во избежание поломки массажного кресла.
- Не проливайте воду или другие жидкости на контроллер, чтобы избежать отказа клавиш или программных ошибок.
- Не сдавливайте контроллер или шнур питания тяжелыми предметами.

► Инструкции по подключению Bluetooth

Методы работы Apple iOS и Android различны, конкретные инструкции следующие:

► Система Apple iOS:

Откройте значок магазина приложений Apple и введите ключевое слово «Mijia» в верхнем правом углу, чтобы загрузить приложение для устройства Apple.

В приложении вы можете включить Bluetooth и подключиться к массажному креслу.

► Система Android:

Откройте значок магазина приложений Android и введите ключевое слово «Mijia», чтобы загрузить приложение для устройства Android.


В приложении вы можете включить Bluetooth и подключиться к массажному креслу.

► Система Android: после установки загруженного приложения «Mijia» подключитесь к устройству (массажному креслу), чтобы управлять массажным креслом.

► Система Apple: после установки загруженного приложения «Mijia» вы можете управлять массажным креслом после простых настроек.

► Когда система Android / Apple подключена и сопряжена, питание массажного кресла должно быть включено, а функция Bluetooth включена, в противном случае подключение и сопряжение невозможно.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

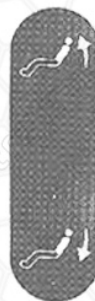

Кнопка подъема спинки

► Нажмите и удерживайте эту кнопку, и спинка автоматически поднимется в исходное положение спинки; отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.



Кнопка опускания спинки

► Нажмите и удерживайте эту кнопку и удерживайте, чтобы спинка автоматически опустилась в самое нижнее положение; отпустите кнопку, чтобы остановить опускание.

1
零重力
2

Невесомость 1 / 2

► Нажмите кнопку невесомости 1, на ЖК-экране загорится индикатор нулевой гравитации 1, и массажное кресло перейдет в состояние нулевой гравитации 1, нажмите кнопку нулевой гравитации 1 еще раз, чтобы вернуться;

► Нажмите кнопку невесомости 2, ЖК-экран Горит невесомость 2 в верхней части, массажное кресло переходит в состояние невесомости 2, нажмите кнопку невесомости 2 еще раз, чтобы вернуться.

Описание меню ЖК-экрана

► Автоматическая программа

Когда питание включено, нажмите кнопку «Включение/Выключение», ЖК-экран загорится, выберите «Авто», чтобы войти в параметры меню автоматической программы, вы можете выбрать восстановление после упражнений, растяжку и активацию, отдых и расслабление, рабочую декомпрессию, фокусировку на плечах и шее и облегчение поясницы. Любой из шести видов массажных процедур для целевого массажа. (См. Меню ниже)



Восстановление после упражнений: он подходит для восстанавливающего массажа после работы, который может снять усталость за день и эффективно помочь вам восстановить свои физические силы.

Растяжка и активация: он подходит для растягивающего массажа сидячих офисных работников или водителей, который может растянуть мышцы и кости и восстановить физическую силу.

Отдых и расслабление: расслабляющий массаж, подходящий для утренних или дневных сеансов, который поможет вам укрепить жизненную силу мышц.


Рабочая декомпрессия: подходит для уменьшения болезненности спины, талии и шеи.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Шаг 1: Распаковка, установка


Выньте все компоненты массажного кресла.

- ▶ Откройте упаковочную коробку и осторожно извлеките комплект всех деталей.
- ▶ Проверьте, все ли аксессуары укомплектованы (по одному сверяйте с упаковочным листом).

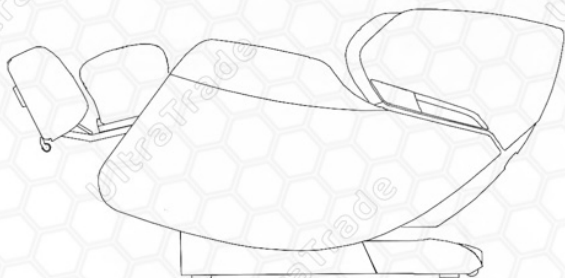


Шаг 2: Подключение контроллера

- ▶ Подключите штекер кабеля передачи данных на блоке контроллера к гнезду контроллера на боковой стороне подушки сиденья (обратите внимание на положение между штекером и розеткой);

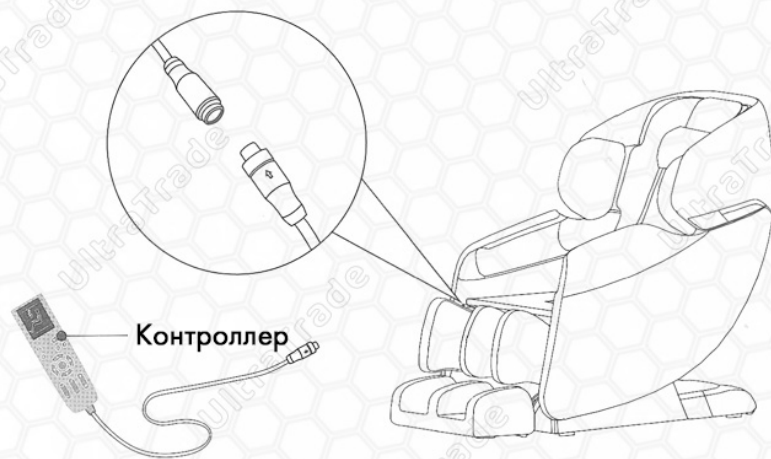

- ▶ Затем подключите кабель питания массажного кресла в розетку.

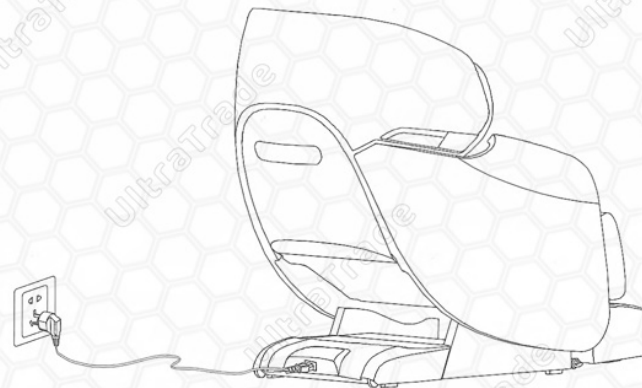

Отладка массажного кресла

- ▶ С помощью контроллера переведите раму спинки в крайнее положение, поднимите раму поддержки икр ног в самое верхнее положение и выдвиньте ее в самое длинное положение. Перед работой убедитесь, что вокруг массажного кресла достаточно места.
- ▶ После проверки различных функций полностью перезагрузите массажное кресло и выключите выключатель питания. (Пожалуйста, обратитесь к "описанию кнопок контроллера" при выполнении процедур выбора массажа перед тем, как сесть)
- ▶ Убедитесь, что массажная рама поддержки икр ног подсоединена и надежно закреплена на держателе изделия.
- ▶ Перед посадкой убедитесь, что все детали вернулись на место. Если вы обнаружите, что какая-либо часть продукта не была возвращена, пожалуйста, включите выключатель питания, чтобы полностью вернуть его.


Внимание!

- ▶ Не садитесь, когда подставка для массажа икр ног поднята.
- ▶ Не подвергайте массажную раму поддержки икр ног резкому чрезмерному давлению, иначе можно повредить механическую структуру.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Метод перемещения

- ▶ Дно изделия оснащено колесиками для облегчения перемещения.
- ▶ Поднимите спинку сиденья в самое верхнее положение.
- ▶ Выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки.
- ▶ Поднимите переднюю половину изделия, как показано на рисунке, и используйте ролики, чтобы переместить его в желаемое место.

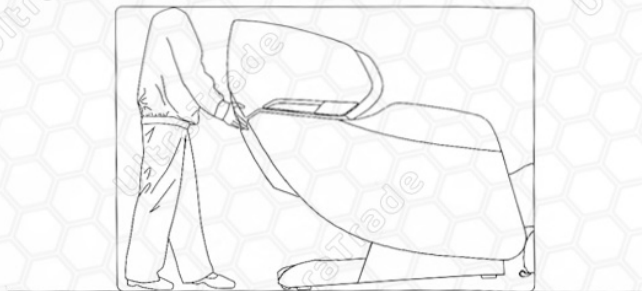

Внимание!

- ▶ Не перемещайте массажное кресло при нахождении людей в нем.
- ▶ При перемещении изделия не используйте поручни. Возьмитесь за нижнюю часть изделия и удерживайте спинку, чтобы переместить его (рекомендуется как минимум 4 человека).

Подключение к электросети

- ▶ Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку.
- ▶ Включите массажное кресло.


Внимание!

- ▶ Перед запуском убедитесь, что шнур питания не поврежден, провода не оголены.
- ▶ Перед включением питания убедитесь, что выключатель питания массажного кресла находится в выключенном положении.

Место установки


Безопасное расстояние вокруг массажного кресла:

- ▶ Горизонтальное расстояние между верхом спинки и стеной (или другими предметами) должно быть больше 15 см.
- ▶ Расстояние между передним концом кресла и стеной (или другими предметами) по горизонтали должно превышать 20 см.

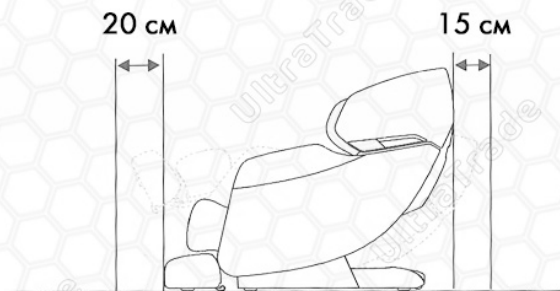

Защита пола

- ▶ Дно массажного кресла может повредить пол. Рекомендуется положить под массажное кресло ковер и другие амортизирующие материалы, чтобы не повредить пол.

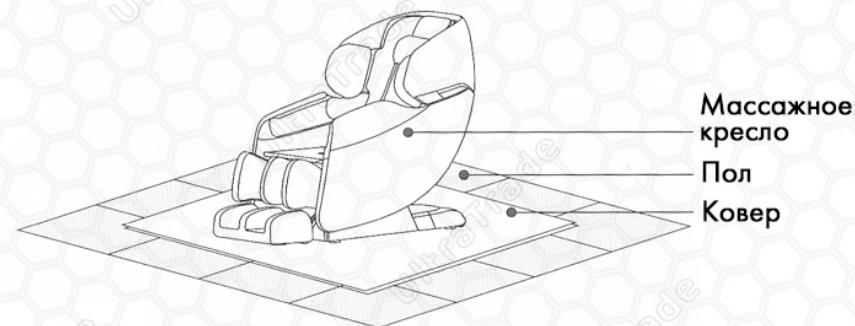

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

- ▶ Не ставьте массажное кресло во влажное место (например, в ванную).
- ▶ Не ставьте массажное кресло рядом с источником высокой температуры (Например, печь), чтобы не вызвать возгорания или повреждения кожи.
- ▶ Это массажное кресло относится к электроприборам класса I. Обязательно используйте трехжильную розетку. Убедитесь, что провод заземления на розетке питания надежно заземлен, чтобы избежать поражения электрическим током и других неблагоприятных последствий.

Обслуживание

- ▶ Пожалуйста, используйте хлопчатобумажную ткань, смоченную нейтральным моющим средством, чтобы стереть грязь с задней крышки, подлокотников, рамы и т.д. Осторожно протрите тканью.
- ▶ Протирайте грязь с контроллера, блока питания или других деталей сухой тканью.
- ▶ Пожалуйста, протрите грязь на различных задних подушках сначала тканью, смоченной нейтральным моющим средством, затем протрите влажной тканью и, наконец, высушите в проветриваемом месте.
- ▶ В случае загрязнения массажной части для ног расстегните молнию, чтобы снять чехол, промойте его нейтральным моющим средством, высушите и установите обратно в пластиковую раму.

Предостережение

- ▶ Обязательно вынимайте вилку из розетки при выполнении технического обслуживания. Не тяните и не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током и травм. При протирании задней крышки будьте осторожны, чтобы моющее средство не попало в блок питания!
- ▶ Не используйте агрессивные чистящие средства, такие как бензин или растворитель, для очистки изделия, в противном случае изделие может выцветать, а конструкция массажного кресла подвергнется коррозии и потрескается.
- ▶ Не гладьте материал массажного кресла утюгом или отпаривателем.

Способ хранения

- ▶ Отключите от электросети, очистите от грязи и пыли, накройте пылезащитным чехлом.

Предостережение

- ▶ Не размещайте кресло в местах, подверженных прямому воздействию высоких температур.

Обращайте внимание, нет ли необычных симптомов:

- ▶ Запах гари;
- ▶ Питание включается при прикосновении к проводу;
- ▶ Шнур питания горячий;

Если происходят вышеуказанные явления, для предотвращения несчастных случаев, пожалуйста немедленно прекратите использование массажного кресла. Выключите питание, отключите вилку из розетки.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

Пользователям строго запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать массажное кресло.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.