



Массажное кресло Momoda Petite 3D Intelligent Massage Chair (RT5859)
Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за покупку Массажного кресла Xiaomi Petite 3D Intelligent Massage Chair (RT5859). Перед использованием внимательно прочтите это руководство и обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности», там указана важная информация для обеспечения правильной работы и использования. Сохраните это руководство для использования в будущем.

1. Откройте коробку и достаньте аксессуары.





1. Снимите упаковочную ленту внешней коробки корпуса массажного кресла, поднимите наружную коробку и вытащите ее.
2. Выньте аксессуары и отложите для дальнейшего использования.

2. Размещение массажного кресла


- * Достаньте все массажное кресло из коробки и поместите его в подходящее место в доме.
- * Не размещайте его под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами и т.п. В противном случае кожа обесцветится или затвердеет.
- * Чтобы предотвратить повреждение пола и снизить уровень шума, кладите под массажное кресло коврик, ткань и т.п.

- * Убедитесь, что перед массажным креслом и позади него нет препятствий (за креслом должно быть зарезервировано пространство более 10 см).
- * Не кладите его во влажное или неровное место.
- * Чтобы предотвратить помехи сигнала, держитесь подальше от телевизоров, радиоприемников и другого оборудования на расстоянии более 1 метра.

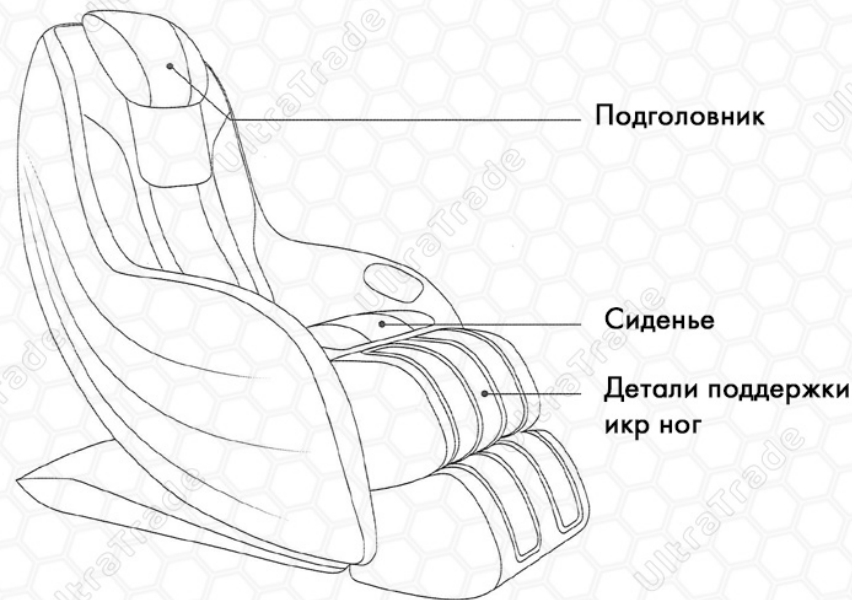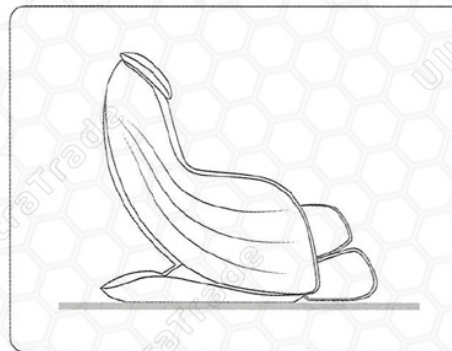

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Перемещение массажного кресла

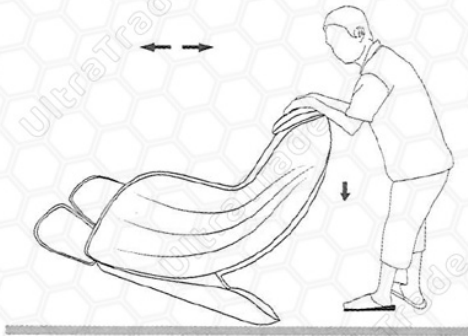


1. Как показано на рисунке слева, сначала нажмите на спинку обеими руками и наклоните кресло примерно на 45°.
2. Используйте ролики, чтобы осторожно толкать массажное кресло вперед или назад, пока оно не окажется в подходящем положении.



Примечание

- * Когда кто-то лежит на массажном кресле, не двигайте его.
- * Перемещение массажного кресла может привести к повреждению пола, рекомендуется подкладывать подушку под изделие.
- * Во избежание падения крепко держите массажное кресло при перемещении массажного кресла.

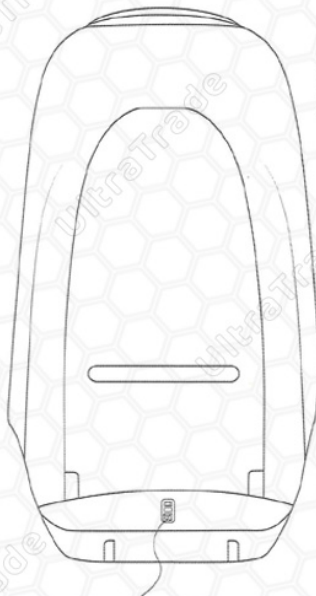


Массажное кресло
Вид сзади

Кнопка
Включение / Выключение

Предохранитель

Разъем питания

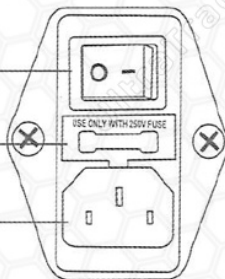

Описание клавиш пульта дистанционного управления


Включение / Выключение



0.00
零重力

Невесомость

Режим автоматического массажа

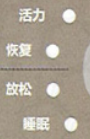

Массаж ягодиц, бедер

Режим ручного массажа



Ролики для ног и воздушные подушки для ног

Зона массажа



Воздушные подушки

Положение массажера вверх



Подъем спинки

Положение массажера вниз



Опускание спинки



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Описание функций кнопок

"Включение / Выключение"

Нажмите эту кнопку один раз, массажное кресло находится в режиме ожидания. Нажмите еще раз, чтобы остановить все функции и выключить массажное кресло.

"Невесомость"

Клавиша включения состояния невесомости (угол невесомости 122 градуса).

"Режим автоматического массажа"

Программа автоматического массажа: На выбор предлагается 4 режима: режим жизненной энергии, режим восстановления, режим релаксации и режим сна.

"Массаж ягодиц, бедер"

Нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить режим массажа ягодиц.

"Ролики для ног и воздушные подушки для ног"

Нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить роликовый массажер для ног и воздушные подушки для ног.

"Режим ручного массажа"

Программа ручного массажа:

На выбор есть 3 режима ручного массажа: разминание, постукивание и точечный массаж Шиатсу.



"Воздушные подушки"

Сила воздушных подушек может регулироваться, с 3 уровнями регулировки: слабый, средний и сильный.



"Зона массажа"

Зона массажа выбирается в соответствии с потребностями, и она эффективна, когда включен саморегулирующийся массаж.



"Положение массажера вверх / вниз"


Во время массажа зоны нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отрегулировать положение массажных роликов вверх / вниз.



"Подъем / опускание спинки"

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отрегулировать угол наклона спинки вверх / вниз.

Отключение пинания

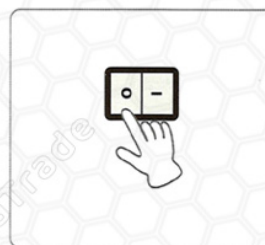

Переключатель находится на задней стороне электрического блока управления

1. Нажмите кнопку включения / выключения на пульте управления на подлокотнике массажного кресла, чтобы прекратить все действия.
2. Если оно не используется в течение длительного времени, обязательно установите клавишу включения / выключения питания массажного кресла в положение «О», чтобы продлить срок службы массажного кресла.
3. Выньте вилку из розетки.
4. Не скручивайте шнур питания, чтобы он не порвался.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Характеристики продукта

Массажное кресло Momoda Petite 3D Intelligent Massage Chair

Модель: RT5859

Номинальное напряжение: 220В

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 100 Вт

Размеры упаковки: 1550мм (Д) x 765мм (Ш) x 860мм (В)

Вес нетто: 63,25 кг

Вес брутто: 73 кг

Произведено: Сямэнь, Китай

Класс безопасности: 1 класс

Время работы продукта по умолчанию: 15 минут

Исполнительный стандарт: GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

Модель и код утверждения СМИITID: Модуль радиопередатчик Jie 2017DP6053

Меры безопасности



* Пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием

* В этом массажном кресле должна использоваться розетка, подходящая квилке.

Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.

Пожалуйста, не модифицируйтевилку без разрешения.

Розетки должны проверяться профессиональными техниками. При использовании электрических изделий, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм, необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

- Обязательно используйте розетку, подходящую квилке.
- Убедитесь, чтовилка полностью вставлена в розетку, чтобы снизить риск короткого замыкания или возгорания.

- Обязательно используйте розетку, подходящую квилке.
- Убедитесь, чтовилка полностью вставлена в розетку, чтобы снизить риск короткого замыкания или возгорания.
- Не храните и не используйте этот продукт на открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами.
- Если во время использования произошел внезапный сбой питания, немедленно установите переключатель в положение «О» и отключите его из розетки, чтобы избежать повреждения продукта.
- Не включайте с массажное кресло, если шнур влажный или поврежден.
- Не вставляйте и не вынимайтевилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать несчастных случаев.
- Когда несовершеннолетние, человек с инвалидностью или физическими недостатками находится рядом с массажным креслом или пользуется им, за ним должен быть произведен надзор опекуна.
- Используйте этот продукт только для целей, описанных в данном руководстве.
- Не используйте аксессуары, не предоставленные Momoda.
- Не вставайте, не садитесь и не прыгайте на опоре для икр, чтобы избежать травм или поломки устройства.
- Не пытайтесь сесть на подлокотники или спинки, во избежании опрокидывания массажного кресла и несчастных случаев.
- Не ложитесь спать во время массажа.
- Следите за чистотой массажного кресла и не вставляйте другие предметы в щели массажного кресла.
- Не перемещайте массажное кресло, потянув за шнур питания.
- Перед каждым использованием проверяйте, нет ли ненормальных трещин на фланеле спинки массажного кресла. Если есть какие-либо отклонения от нормы, не используйте его и своевременно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Этот продукт предназначен только для домашнего использования.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

- Если вы не уверены, что по состоянию здоровья можете пользоваться массажным креслом, обратитесь к врачу.
- Во избежание дискомфорта или травм, вызванных использованием этого массажного кресла, следующие люди должны проконсультироваться с врачом перед использованием этого продукта: люди со злокачественными опухолями, люди с сердечными заболеваниями, беременные женщины, женщины во время менструального цикла, люди, которым требуется спокойная тренировка. Тем, кто проходит лечение, тем, у кого проблемы со спиной, тем, у кого аномалия или деформация шейного отдела позвоночника.
- Если вы чувствуете боль во время использования, немедленно прекратите его использование. Если вы получили повреждения во время использования, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не массируйте красную, опухшую или воспаленную кожу.
- Этот продукт обеспечивает комфортный массаж только для всей семьи. Он не является профессиональным массажным медицинским устройством и не может заменить профессиональное лечение.
- Рекомендуется использовать массажное кресло в течение 30 минут в день, и массаж той же части не должен превышать 15 минут, иначе чрезмерный массаж приведет к контрпродуктивным эффектам, а длительное использование приведет к перегреву массажного кресла и сокращению срок службы изделия.
- Не используйте этот продукт в среде, где впрыскивается газ или кислород.
- Этот продукт не подходит для детей младше 12 лет.

Примечание



- Те, кому не следует использовать этот продукт: лица с физическими, эмоциональными или умственными недостатками, а также лица с недостаточным опытом и знаниями. (Если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, в отношении использования продукта.)
- Следите за тем, чтобы дети не играли с массажным креслом.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или специальный компонент, приобретенный у производителя или в отделе обслуживания.
- Поверхность прибора нагревается, поэтому люди, не чувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при его использовании.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.


Ненормальные ситуации и способ решения

Ситуация	Способы решения
Звук во время работы	Звук, производимый механизмами кресла, нормальная ситуация, не влияет на работу кресла.
Электричество подключено, но массажное кресло не работает.	Убедитесь, что силовой кабель подключен, убедитесь, что выключатель питания массажного кресла находится в положении « I ».
Во время использования контроллер работает, но массажным креслом не получается управлять.	Если после длительного периода работы температура массажного кресла слишком высока, массажное кресло автоматически переходит в состояние защиты от перегрева. Пожалуйста, выключите питание и приостановите использование на 30–50 минут, чтобы обеспечить внутреннее рассеивание тепла.
Во время использования контроллер не работает и массажное кресло перестало работать.	После активации функции таймера. Если установленное время истекло, включите еще раз, чтобы управлять им.

В случае возникновения ненормальной ситуации, чтобы предотвратить несчастные случаи, пожалуйста, прекратите использование устройства и отсоедините шнур питания.

Если следующие решения по-прежнему не работают, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обслуживание

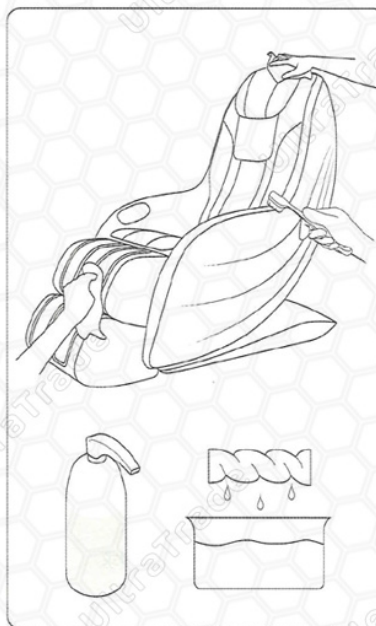

Чистка

Не используйте металлическую губку, абразивные чистящие средства или коррозионные жидкости (например, бензин или ацетон) для очистки продукта.

1. Выньте вилку из розетки.
2. Протрите массажное кресло, пульт дистанционного управления и шнур питания сухой тканью.
3. Не используйте влажную ткань или моющее средство.

Хранение

1. Выньте вилку из розетки.
2. Храните этот продукт в прохладном и сухом месте вдали от солнечных лучей.
3. Не ставьте на изделие тяжелые предметы.

Если обивка повреждена или присутствуют механические сбои, пожалуйста, прекратите использование этого продукта и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если вы не используете массажное кресло в течение длительного времени, отключите шнур питания!

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Подключение к Mi Home

Этот продукт был подключен к Mi Home. Зайдите в магазин приложений на вашем смартфоне, в поиске наберите "Mi Home", установите приложение. Откройте домашнюю страницу "Mi Home", нажмите "+" в правом верхнем углу страницы и добавьте устройство в соответствии с подсказками приложения.

Примечание: из-за обновления приложения Mi Home фактический внешний вид и функционал приложения могут немного отличаться от приведенного выше описания.

Обратите внимание, что Xiaomi и Mi Home выполняют только проверку на уровне программного обеспечения, и Xiaomi и Mi Home не несут ответственности за производство, стандартную реализацию и контроль качества продукта компании Momoda.



1. Найдите "Mi Home" в магазине приложений для вашего смартфона, загрузите и установите его.
2. После завершения установки подключите телефон к требуемой конфигурации сети, нажмите, чтобы открыть Mi Home, и войдите в систему.
3. На главной вкладке Mi Home щелкните в правом верхнем углу [+]

4. Войдите на страницу добавления оборудования, наберите название массажного кресла в поиске, выберите соответствующее.



5. Включите WiFi мобильного телефона, завершите настройку в соответствии с информацией на странице и подтвердите ее (указанная выше операция подтверждена) и нажмите Далее.



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

17:15 54%

6. Введите пароль Wi-Fi и нажмите "Далее".

选择设备工作Wi-Fi

此设备只支持使用2.4G Wi-Fi连接设备
Wi-Fi名称仅支持英文字母及数字

51ShaoXi

下一步

7. Выберите массажное кресло и начнется подключение.

17:33 51%

添加蓝牙设备



小摩侠3D按摩椅

17:23 53%

尝试与设备建立连接

43%

设备连接中

请勿断开蓝牙，并将手机与设备尽量靠近

再次扫描

17:30 52%

连接成功



选择设备所在房间



跳过

1/3

17:30 52%

连接成功



设备名称

小摩侠3D按摩椅

下一步

2/3

8. Данная страница показывает, что соединение установлено, то есть конфигурация сети выполнена успешно.

9. Добавить имя устройства.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

11. Совместное использование оборудования.



Управление массажным креслом через мобильное приложение

"Включение / Выключение"

Описание функции: включение и выключение массажного кресла

Включение: нажмите кнопку "Включение / Выключение", когда кнопка переключения серого цвета, массажное кресло успешно включится, а цвет кнопки изменится с серого на синий.

Выключение: когда кнопка переключателя синего цвета, нажмите кнопку "Включение / Выключение" кресло выключится, а цвет кнопки изменится с синего на серый.



"Автоматический режим"

Описание функции: выберите автоматический режим массажа, и массажное кресло выполнит программу массажа в соответствии с выбранным режимом движения.

1. Выберите автоматический режим и метод, который вам нужен. Если вы нажмете "Режим релаксации", кнопка станет синей, массажное кресло будет работать в соответствии с "Режим релаксации", приложение отобразит "Режим релаксации" и начнется обратный отсчет, массаж автоматически остановится, когда время закончится, и статус приложения будет обновлен.

2. Проведите пальцем влево и вправо, чтобы отобразить больше техник массажа. На выбор предлагается 4 метода: режим жизненной энергии, режим восстановления, режим релаксации и режим сна, которые можно переключать по желанию.

12. Устройство успешно добавлено.



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



"Ручной режим"

Описание функции: выберите метод ручного массажа, массажное кресло будет выполнять программу массажа в соответствии с выбранным методом, метод является одиночным, то есть одновременно может быть выбран только один метод.

В ручном режиме есть 3 метода: разминание, постукивание и точечный массаж, которые можно переключать по желанию.



Регулировки

Описание функции: Настройте массажное кресло так, чтобы массаж был более комфортным.

Регулировка: в автоматическом режиме функция регулировки не может быть выбрана; в ручном режиме регулировка не является обязательной.

Сила воздушных подушек: есть три передачи: слабая, средняя и сильная (регулируется только при включении бедренной воздушных подушек и ног и ступней)

Функция фиксированной точки: нажмите [Начать функцию фиксированной точки], удерживайте нажатой кнопку вверх и вниз, происходит подъем или опускается в желаемое положение, отпустите кнопку, чтобы остановить подъем или опускание.

Невесомость: нажмите "Невесомость", массажное кресло перейдет в режим невесомости, и щелкните еще раз, чтобы вернуться в исходное положение.

Подъем спинки: долгое нажатие "Подъем спинки", спинка массажного кресла поднимается.

Опускание спинки: длительное нажатие "Опускание спинки", спинка массажного кресла опускается.

Бедренные воздушные подушки: нажмите, чтобы включить бедренные воздушные подушки.

Воздушные подушки ног и ступней: нажмите, чтобы включить воздушные подушки для ног и функцию роликового массажа ступней

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.